

輸血用血液製剤の輸血口の形態追加のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より日本赤十字社の血液事業に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、輸血用血液製剤の輸血口の形態として「ツイストキャップ」が追加されることになりました。これにより、保存前白血球除去を実施した全血採血由来の輸血用血液製剤については、輸血口の形態は次のとおりとなりますのでご案内申し上げます。

今後ともご指導ご鞭撻の程、よろしくお願い申し上げます。

謹白

1. 対象製剤

保存前白血球除去を実施した全血採血由来輸血用血液製剤

2. 輸血口の形態

輸血口の形態はツイストキャップ、プロテクター、ピールタブの3種類です。製剤別の輸血口の形態については下記の表をご覧ください。

輸血口の開封方法と輸血セットのプラスチック針の刺し方については裏面をご参照ください。

輸血口	ツイストキャップまたはプロテクター	
製剤名	人全血液-LR「日赤」*1	照射人全血液-LR「日赤」*1
	赤血球濃厚液-LR「日赤」*1	照射赤血球濃厚液-LR「日赤」*1
	洗浄赤血球-LR「日赤」*1	照射洗浄赤血球-LR「日赤」*1
	合成血-LR「日赤」*1	照射合成血-LR「日赤」*1
	新鮮凍結血漿-LR「日赤」*1、*2	

輸血口	ピールタブまたはプロテクター	
製剤名	解凍赤血球-LR「日赤」	照射解凍赤血球-LR「日赤」

* 1：既存の対応製剤（人全血液CPD「日赤」、照射人全血液CPD「日赤」、赤血球M・A・P「日赤」、照射赤血球M・A・P「日赤」、洗浄赤血球「日赤」、照射洗浄赤血球「日赤」、合成血「日赤」、照射合成血「日赤」、新鮮凍結血漿「日赤」）の輸血口の形態はピールタブまたはプロテクターです。

* 2：成分採血由来の新鮮凍結血漿「日赤」（FFP-5）については輸血口の形態の変更はありません。

3. 供給開始時期

輸血口にツイストキャップを使用した製剤は平成19年1月16日採血分から順次供給を開始します。


4. お問い合わせ

最寄りの赤十字血液センター医薬情報担当者へお願いいたします。

【全血採血由来輸血用血液製剤の輸血口の形態と開封方法】

ツイストキャップ


キャップ

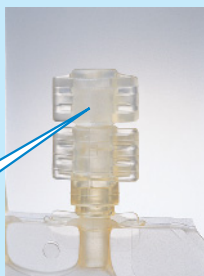

キャップ部分をつまみ、強くねじ切ります。

プロテクター

羽根部

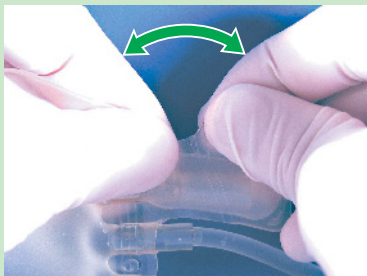

切り込み部を中心の位置にして羽根部とプロテクター下部をしっかりと持ち、切り込み部を左右に裂くように開封します。

ピールタブ

ピールタブ



ピールタブを強く引き、輸血口を露出させます。

【輸血セットのプラスチック針の刺し方】



血液バッグを平らに置いてプラスチック針を少しひねりながら、まっすぐ前進させ、根元まで十分差し込みます。点滴スタンドに吊り下げたまま差し込むと血液が漏れ出すことがあります。